


# インキュベーター用オプション シェーカー

遠隔操作による全自動で  
培養しながらのシェーキングを実現

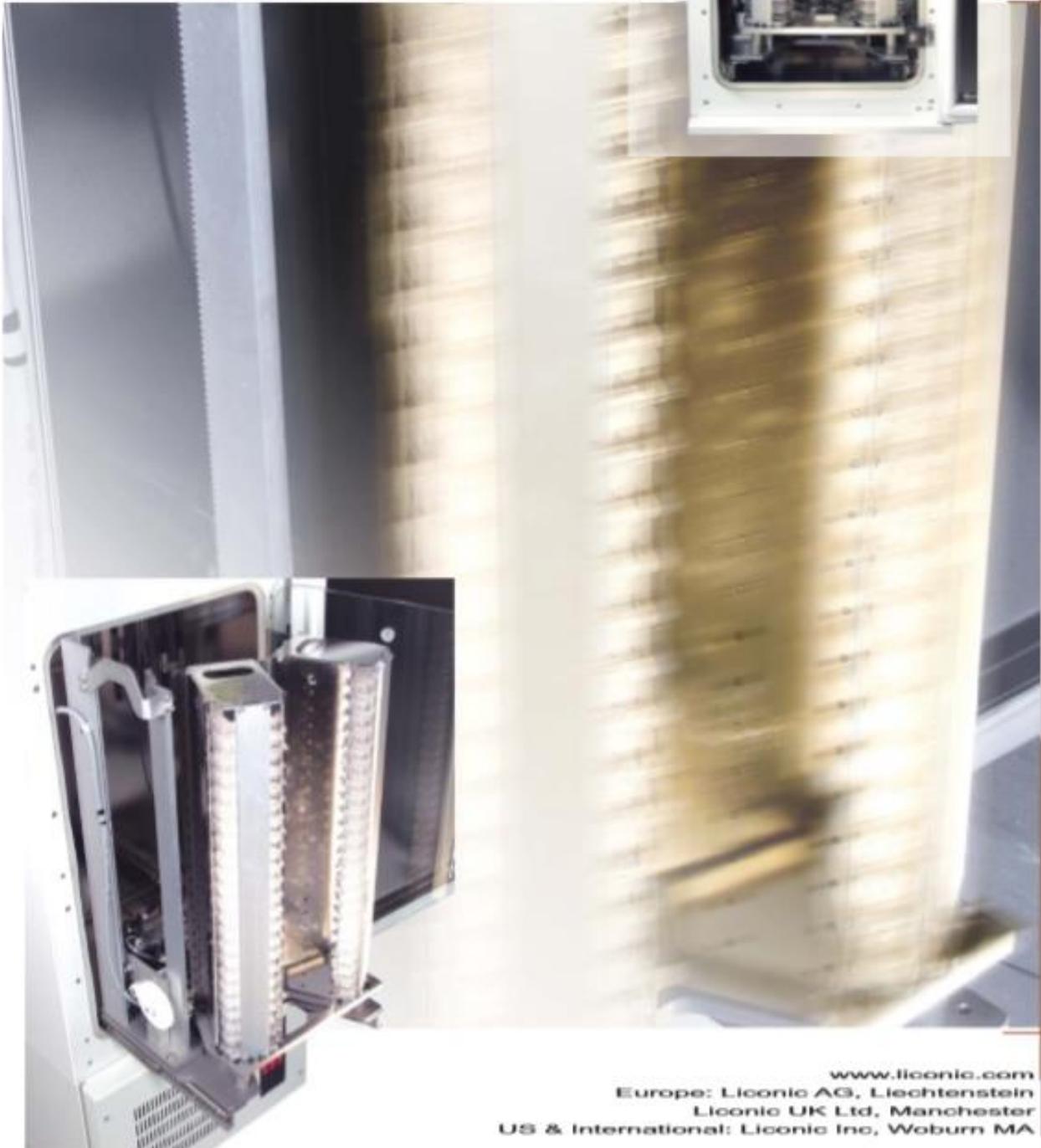

Options

### General Information

シェーカーは、プレートへのアクセスを感知して自動で止まる機能を備えています。

シェーカーの無いユニットのドライバーにも対応していますので、プレートの取り扱いに特別なコマンドは不要です。

振幅と速度はソフトウェアの設定で調整することができます。

### Orbital Shaker

Technical Specifications	
Type	Orbital
Amplitude	1 mm 0-1200 rpm
	3 mm 0-600 rpm
	6 mm 0-400 rpm
Frequency	Software Adjustable
Positioning	Integrated
Handling Access Control	Automatic
Manual Access	User Door
Activate / Deactivate	Remote Control

### Order Information

	Order Nr.	Order Nr.
Shaking option, orbital, 1mm Amplitude, 600rpm max. for STX40, STR44	9118 12 24	for LPX44 9147 00 16
Shaking option, orbital, 1mm Amplitude, 1200rpm max. for STX40, STR44	9118 12 25	for LPX44 9147 00 17
Shaking option, orbital, 3mm Amplitude, 600rpm max. for STX40, STR44	9118 12 41	for LPX44 9147 00 35
Shaking option, orbital, 6mm Amplitude, 400rpm max. for STX40, STR44	9118 12 42	for LPX44 9147 00 36

対応機種：STX44、STR44、LPX44、STX66、STX280

### Linear / Agitation Shaker

Technical Specifications	
Type	Linear / Agitation
Amplitude	1-100 mm 12-300 rpm
Frequency	Software Adjustable
Positioning	Integrated
Handling Access	Automatic
Manual Access	User Door
Activate / Deactivate	Remote Control

### Order Information

	Order Nr.
Linear Shaking Option	9122 05 15

対応機種

STX110, STX220, STX500  
LPX220, LPX440  
STR240, STR602  
LPR240  
STF130

※対応の可否は、こちらに記載のない機種につきましてはお問い合わせください。